



**OXFORD**



Grúa de  
aluminio,  
plegable

**OXFO**

22.11.2004

INNOVATE.  
BUILD FOR THE FUTURE



**Amplio rango de elevación**



**Capacidad de carga (155 Kg)**




**Fácil de manipular:**



**Más ligera**



**Diseño ergonómico**

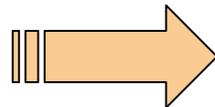

**Plegable, desmontable y portátil**

# OXFORD

- Ruedas delanteras de baja fricción
- Amplia asa de empuje
- **Más ligera que las grúas de acero**
- Muy estable al tener concentrado el peso en la base

### Pedal integrado


- Especialmente situado para ayudar en el inicio del movimiento
- Para utilizar en combinación con el asa de empuje.
- Con recubrimiento antideslizante para un mejor agarre.
- Reduce el esfuerzo requerido por la espalda para iniciar el movimiento.



# OXFORD

### Apertura de patas con el pie

- La fuerza del pie abre las patas
  - No requiere agacharse ni movimientos de torsión
  - Cobertura antideslizante para un mejor agarre.
- El diseño de la base permite mover y girar muy fácil la grúa.

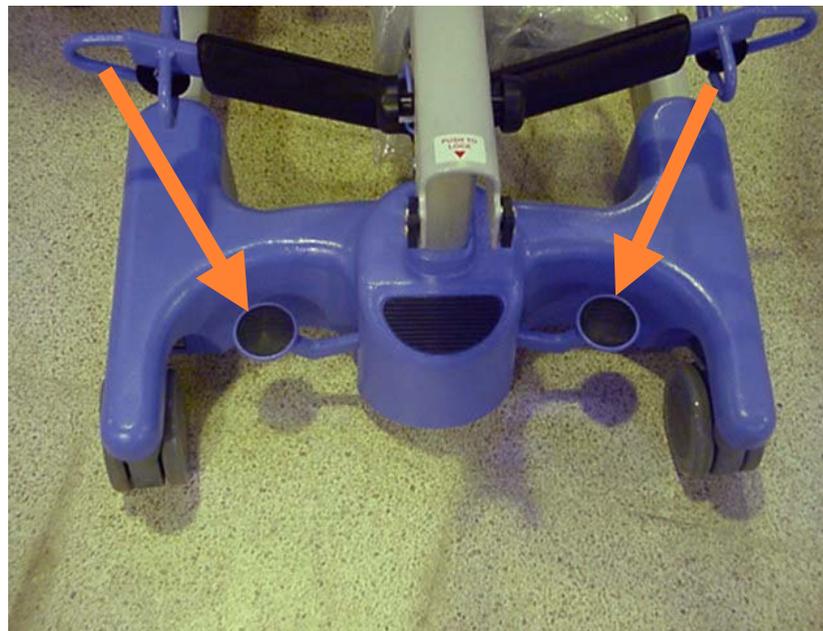

# OXFORD




- El asa sirve a su vez de protección para el sistema de batería.
- El diseño ergonómico facilita su manejo.



# OXFORD

## Base recubierta

- Solida base de aluminio moldeado. Muy ligera y resistente.
- Todos los componentes internos quedan protegidos.
- Diseño ergonómico (puede acercarse mucho al paciente en el suelo)

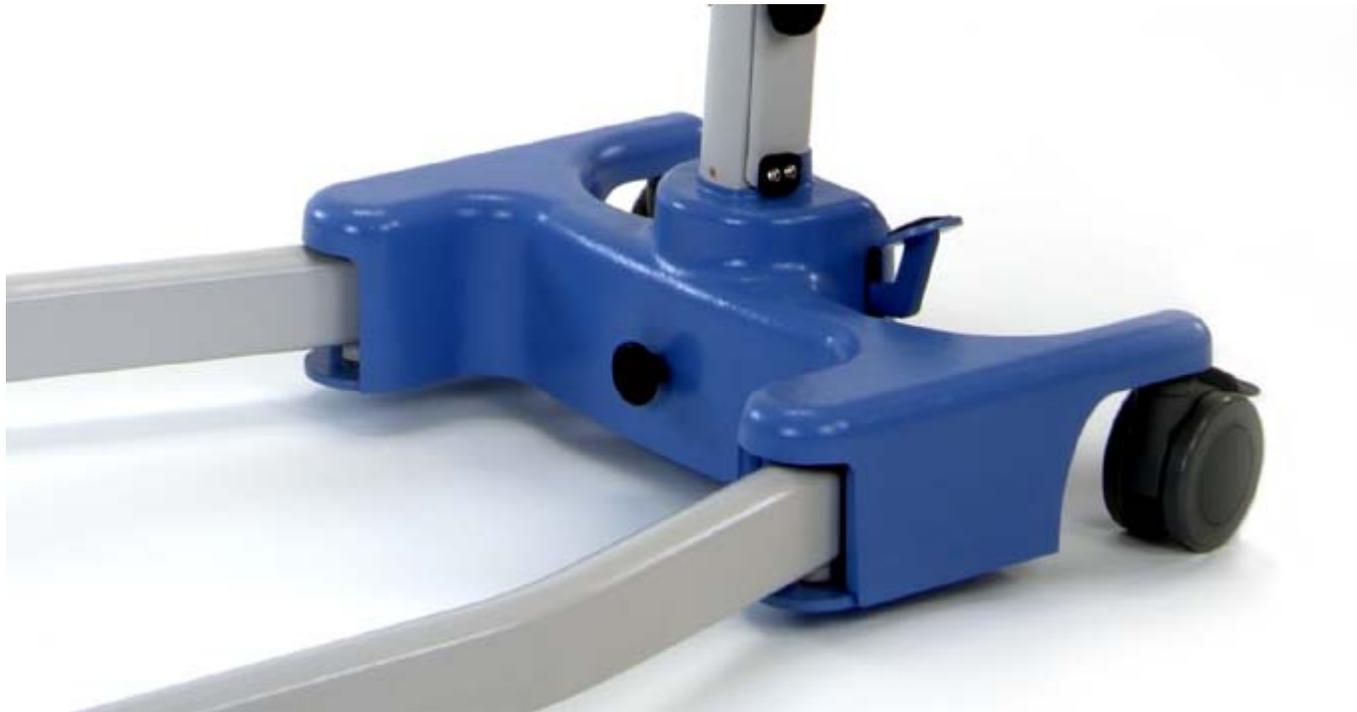

# OXFORD



- Plegado muy compacto para guardarla fácilmente.
- Maleteros de coche, dentro de armarios, debajo de la cama, etc .
- Muy cómoda de mover plegada, rodando tipo carrito.
- Dimensiones plegada:(Alto= 470mm Longitud = 1250 anchura = 550)

# OXFORD

## Plegado sencillo, en 3 pasos

**1**



**2**



**3**




# OXFORD



Asa para sujetar  
la percha al  
plegar

# OXFORD

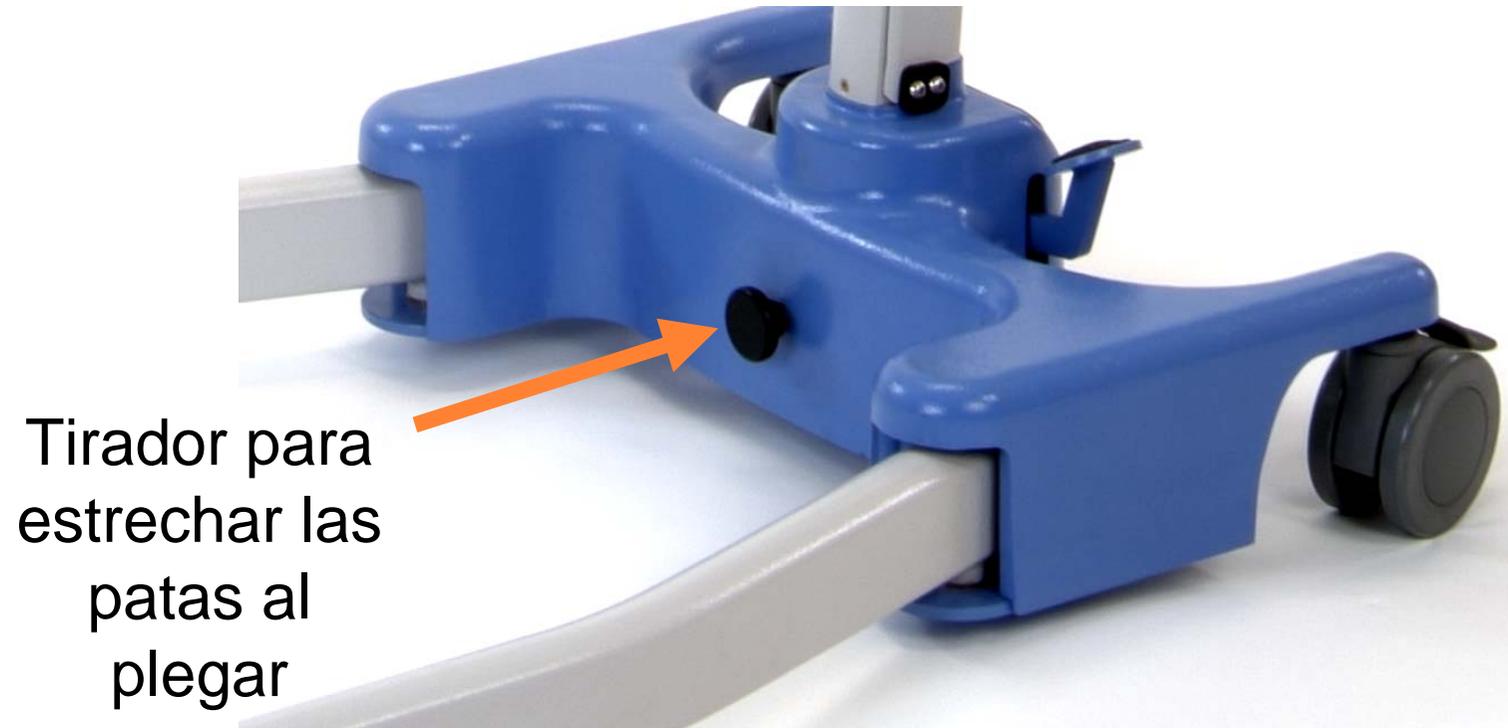

Tirador para  
estrechar las  
patas al  
plegar

# OXFORD


Aflojar para  
plegar



Tirar hacia arriba del  
mástil, y empujarlo  
hacia delante



# OXFORD

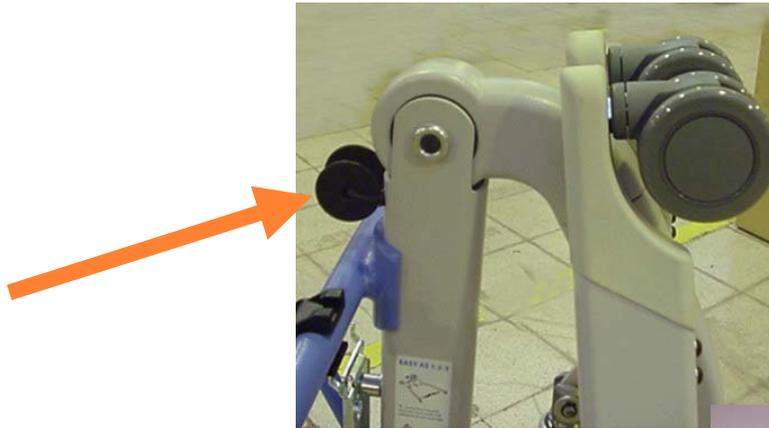

# OXFORD

Además de ser plegable, se puede desmontar en dos partes, para hacer aún más cómodo su transporte



**1) Mástil y brazo = 14.0Kg**

- Mayor flexibilidad para transportar y guardar.
- Parte más pesada : 14.9 kg
- Se monta y desmonta sin herramientas
- Se ajusta a toda la legislación al respecto

**2) Base = 14.9Kg**

# OXFORD

## Manejo tipo carrito

- Una vez plegada, se mueve muy facil sobre sus propias ruedas tipo carrito
- Sus ruedas de 100 mm ruedan sin problemas en todo tipo de superficies
- Se puede incluso bajar y subir escaleras tirando de ella (tipo carrito)



# OXFORD

## Opciones para guardarla

### Dentro de un armario



**Bajo la cama**

### En un rincón



- No ocupa espacio útil cuando no se necesita.
- Se puede ocultar o guardar discretamente

# OXFORD

- Coche de tamaño medio

**Plegada y lista**



**Se introduce facilmente**

**Entra cómodamente**



# OXFORD

	ADVANCE
•Peso máximo	155 Kgs
• Altura minima de la percha	390 mm
• Altura Máxima de la percha	1690 mm
• Anchura interna max. patas	1000mm
• Anchura externa min. patas	670 mm
• Dimensiones PLEGADA	(450 x 1180 x 550 mm)
•Peso total grúa	31.7kg
•Peso de la parte más pesada	14.9 Kg